

7

MESAS DE RECONOCIMIENTO

EXAMINATION AND TREATMENT TABLES



ED4



in the world



**Calidad
Quality**



**Medio Ambiente
Environment**



**Productos Sanitarios
Medical Devices**



Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, así como la transmisión y difusión en cualquier soporte o medio mecánico o electrónico, sin el permiso previo de INMOCLINC, S.A.

It is prohibited the total or partial reproduction of this catalogue, as well as the transmission and diffusion in any support or mechanical or electronic means totally, without the previous permission of INMOCLINC, S.A.

INMOCLINC, S.A. se reserva el derecho de modificar medidas y/o características de los productos de este catálogo sin previo aviso.

INMOCLINC, S.A. reserves the right to make modifications and improvements without previous notice.

This edition replaces the previous.

Esta edición sustituye a la anterior.

Indice

Index

4	Mesas de exploracion y reconocimiento <i>Examination and treatment tables</i>
34	Mesas para exploracion y enyesados <i>Examination and plastering tables</i>
35	Mesas para exploracion y pequeñas cirugías <i>Examination and small surgeires tables</i>
36	Mesas ginecológica <i>Ginaecology tables</i>
40	Accesorios <i>Accessories</i>
41	Mesa universal <i>Universal table</i>
42	Mesa ginecológica y urológica <i>Gynecology and urology examination table</i>
46	Mesa endoscopia y rectoscopia <i>Endoscopy and proctoscopy examination table</i>
48	Mesa ginecológica <i>Ginaecology tables</i>
50	Accesorios <i>Accessories</i>


21
84
56



14712

_Estructura acero inoxidable

_Stainless steel structure

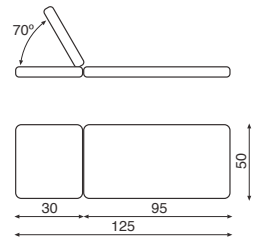






14706



_Estructura de acero con revestimiento en epoxy

_Steel structure with epoxy coating

					
14706	125	50	80	15	0.50
14709	125	50	80	15	0.50
14712	125	50	80	17	0.50



14709

- _Estructura acero cromado
- _Chromed steel Structure

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _MESA PARA EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO
- _Mesa Pediátrica
- _Cabecero regulable mediante cremallera
- _Patas con conteras
- _Tapizado en Skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Pediatric Examination Table
- _Adjustable headrest by rack system
- _Upholstered in skay
- _Floor protection by rubbers studs

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **BLANCO**

IMPORTANT: Finishing **WHITE** colour will be applied if not specified otherwise.

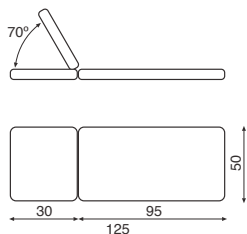

ACCESORIOS VER PÁGINA: 50 / SEE ACCESSORIES PAGE: 50




14751

14752

14757

14758

Colores | Colours

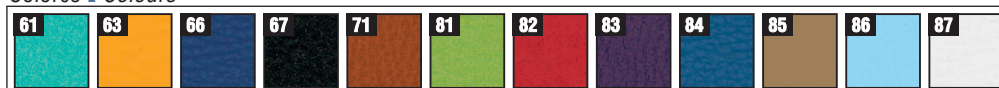




14730

- _Estructura acero inoxidable
- _Stainless steel structure



14727

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Steel structure with epoxy coating

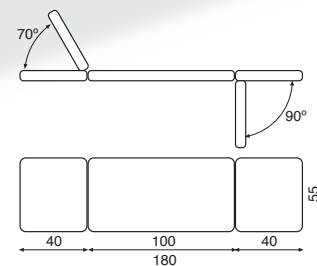



14724

- _Estructura acero cromado
- _Chromed steel Structure

14724	145-180	55	80	23	0.64
14727	145-180	55	80	23	0.64
14730	145-180	55	80	23	0.64

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _MESA PARA EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO
- _Cabecero regulable mediante cremallera
- _Patas con conteras
- _Tapizado en Skay
- _Piecero abatible con fijación


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Adjustable headrest by rack system
- _Floor protection by rubbers studs
- _Upholstered in skay
- _Retractable footrest with fixing system

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

ACCESORIOS VER PÁGINA: 50 / SEE ACCESSORIES PAGE: 50

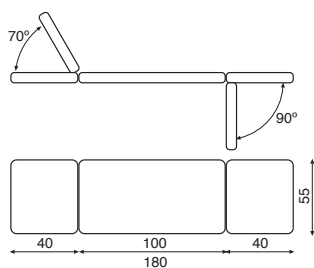


14751

14752

14757

14758

Colores | Colours

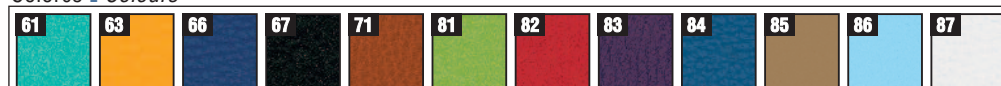



14700



14700	180	70	74	37	0.93

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_ MESA PARA MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO

_ Estructura madera de haya barnizada

_ Cabecero regulable mediante cremallera

_ Tapizado en Skay

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS


_ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE

_ Varnished Beech-wood structure


_ Adjustable headrest by rack

_ Upholstered in skay

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

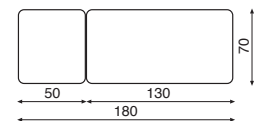


Colores / Colours

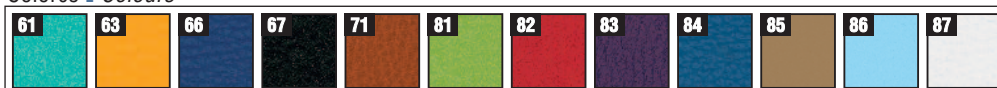



14736

- _Cabecero regulable mediante cremallera
- _Adjustable headrest by rack system

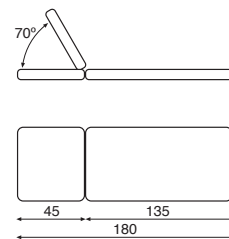

14736	180	55 60-70-80	20	0.70

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _MESA PARA EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO
- _Estructura acero cromado
- _Patas con conteras
- _Tapizado en Skay

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Chromed steel Structure
- _Floor protection by rubbers studs
- _Upholstered in skay

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

MEDIDAS DISPONIBLES
AVAILABLE MEASURES

14736.01	180	60	60-70-80
14736.02	180	65	60-70-80
14736.03	180	70	60-70-80
14736.05	185	60	60-70-80
14736.06	185	65	60-70-80
14736.07	185	70	60-70-80

ACCESORIOS VER PÁGINA: 50 / SEE ACCESSORIES PAGE: 50




14751


14752

14757


14758

Colores / Colours

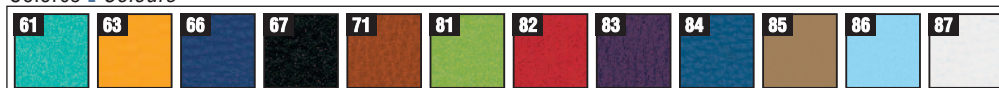

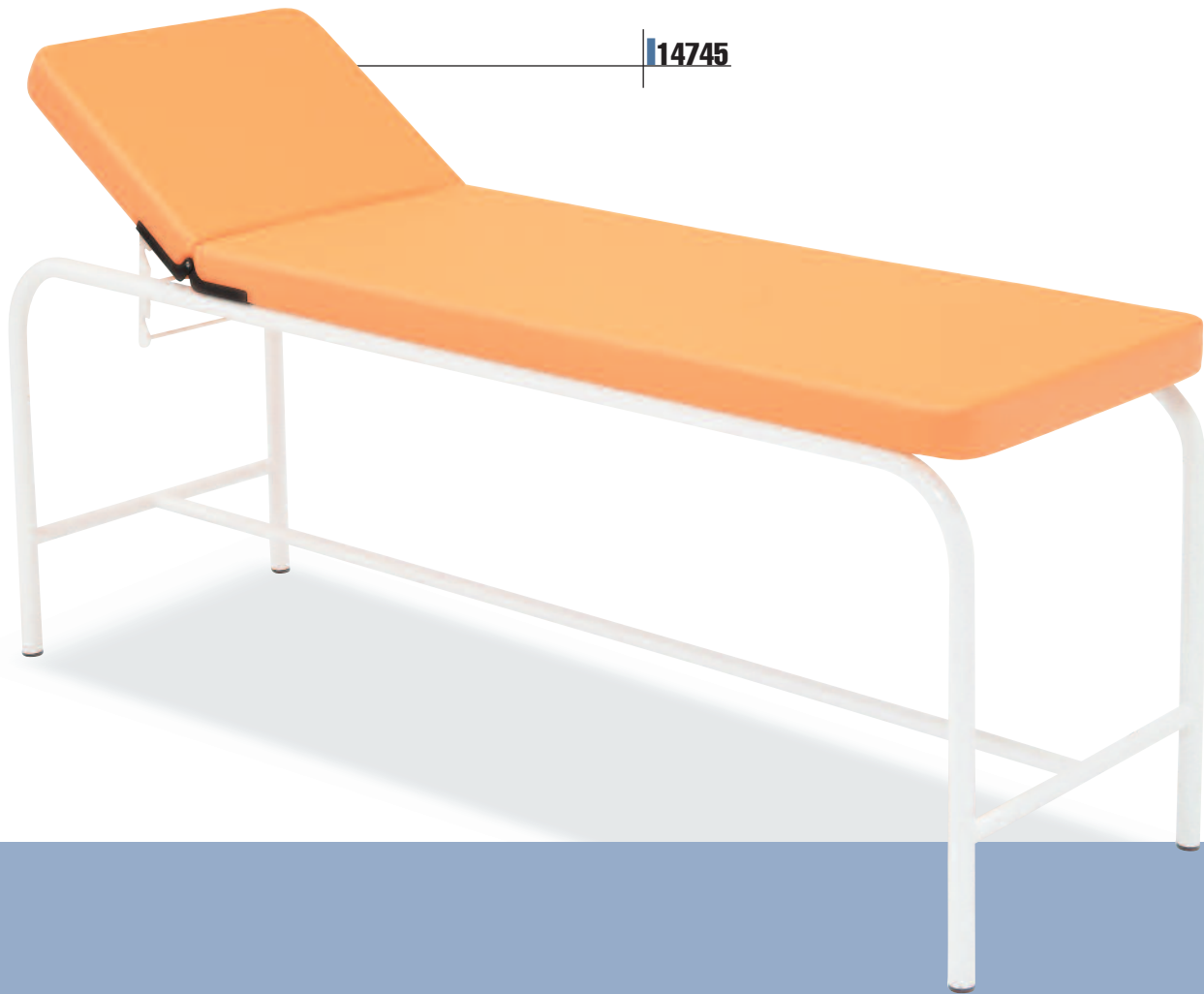

14745

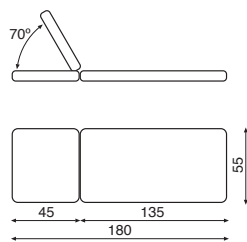

14739	180	55	60-70-80	20	0.70
14745	180	55	60-70-80	20	0.70

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

_ MESA PARA EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO

_ Estructura de acero con revestimiento en epoxy

_ Cabecero regulable mediante cremallera

_ Patas con conteras

_ Tapizado en Skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS

_ EXAMINATION AND TREATMENT TABLE

_ Steel structure with epoxy coating

_ Adjustable headrest by rack system

_ Upholstered in skay

_ Floor protection by rubbers studs

MEDIDAS DISPONIBLES


AVAILABLE MEASURES

14745.01	180	60	60-70-80
14745.02	180	65	60-70-80
14745.03	180	70	60-70-80
14745.05	185	60	60-70-80
14745.06	185	65	60-70-80
14745.07	185	70	60-70-80


¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours

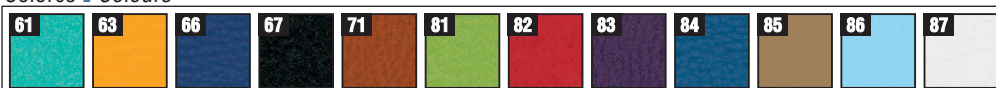

14739

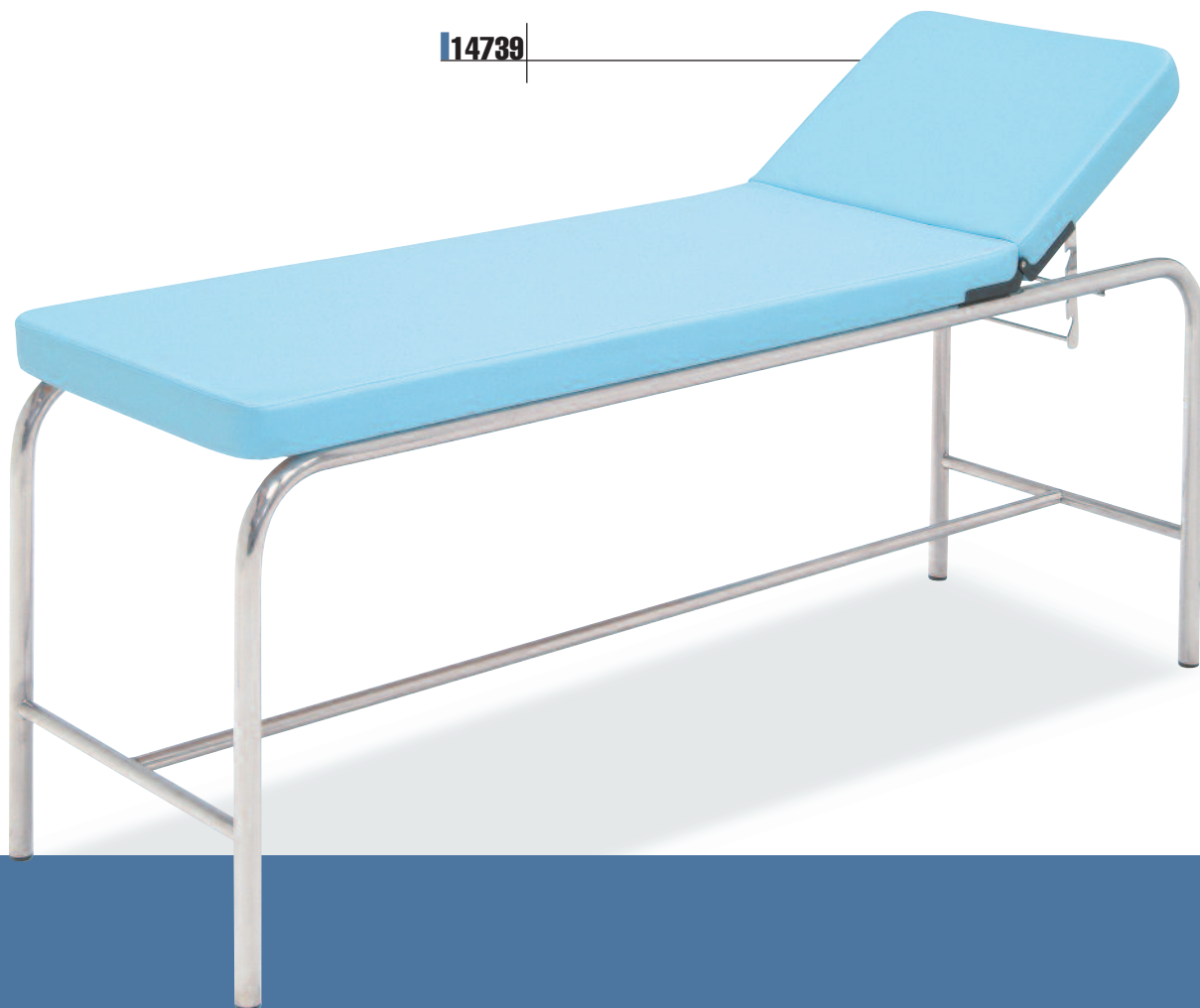

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO
- _ Estructura acero inoxidable
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Patas con conteras
- _ Tapizado en Skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _ Stainless steel structure
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Upholstered in skay
- _ Floor protection by rubbers studs


**MEDIDAS DISPONIBLES
AVAILABLE MEASURES**



14739.01	180	60	60-70-80
14739.02	180	65	60-70-80
14739.03	180	70	60-70-80
14739.05	185	60	60-70-80
14739.06	185	65	60-70-80
14739.07	185	70	60-70-80

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

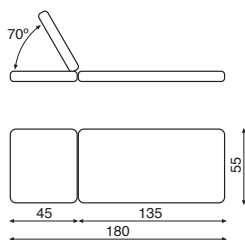

ACCESORIOS VER PÁGINA: 50 / SEE ACCESSORIES PAGE: 50



14751

14752



14757

14758



14760

- _Estructura acero con revestimiento en epoxy
- _Steel structure with epoxy coating

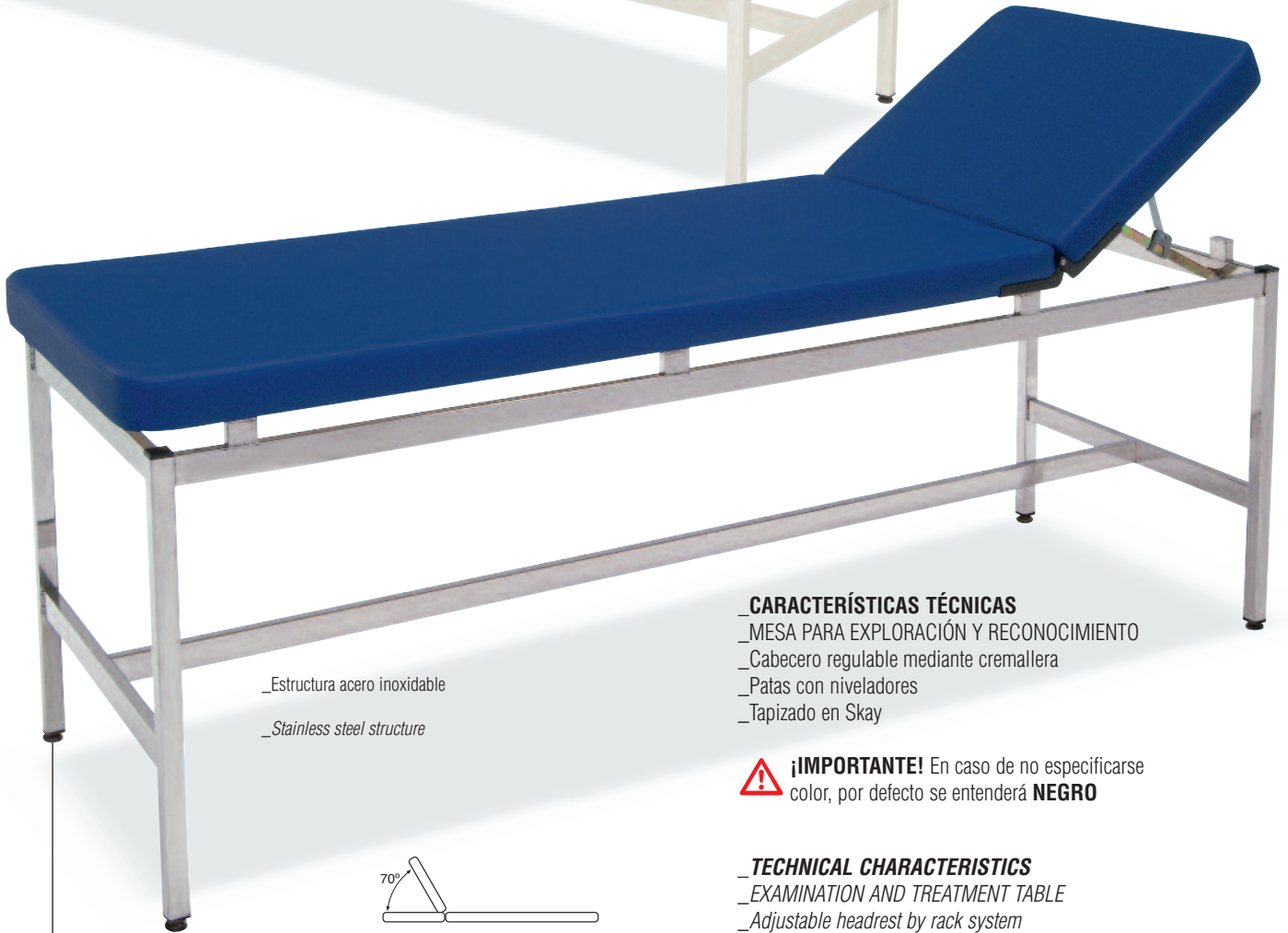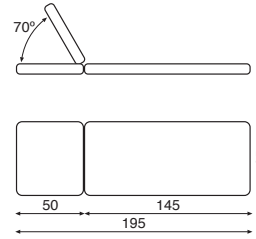

14763

- _Estructura acero inoxidable
- _Stainless steel structure

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _MESA PARA EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO
- _Cabecero regulable mediante cremallera
- _Patas con niveladores
- _Tapizado en Skay

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**


TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _Adjustable headrest by rack system
- _Upholstered in skay
- _Adjustable height studs

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

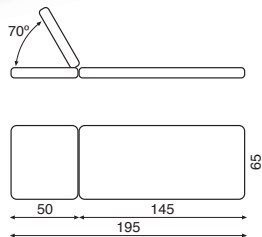


Colores | Colours

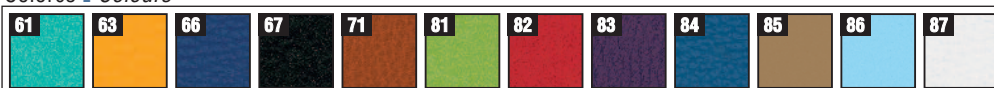

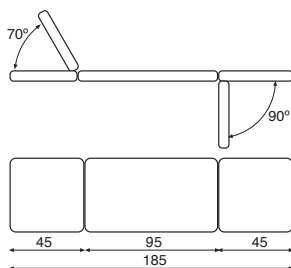


14766

- _Estructura acero inoxidable
- _Stainless steel structure

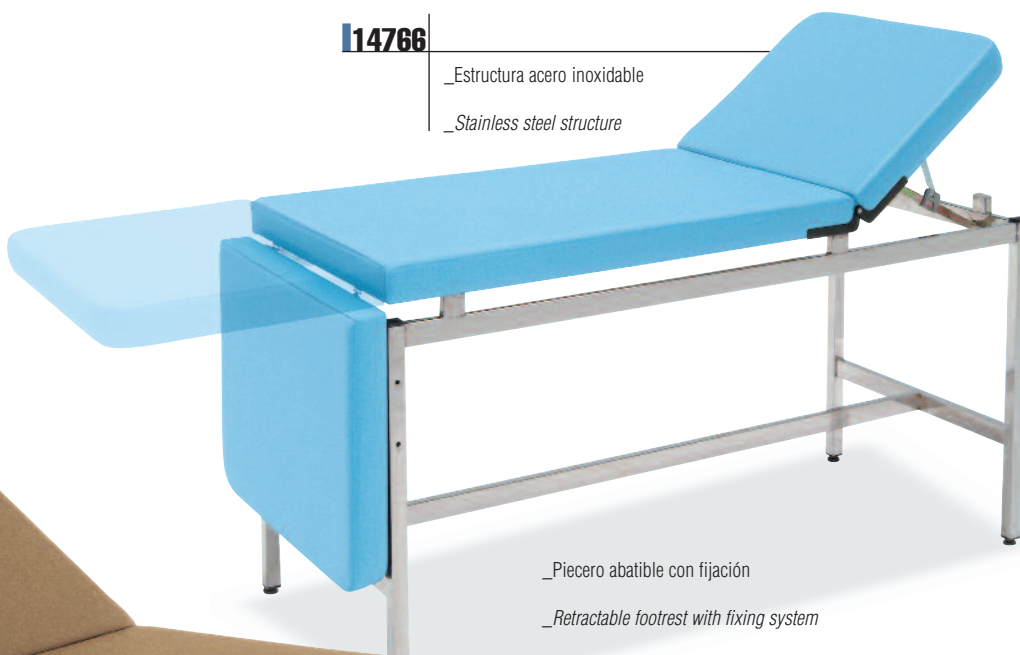


- _Piecero abatible con fijación
- _Retractable footrest with fixing system

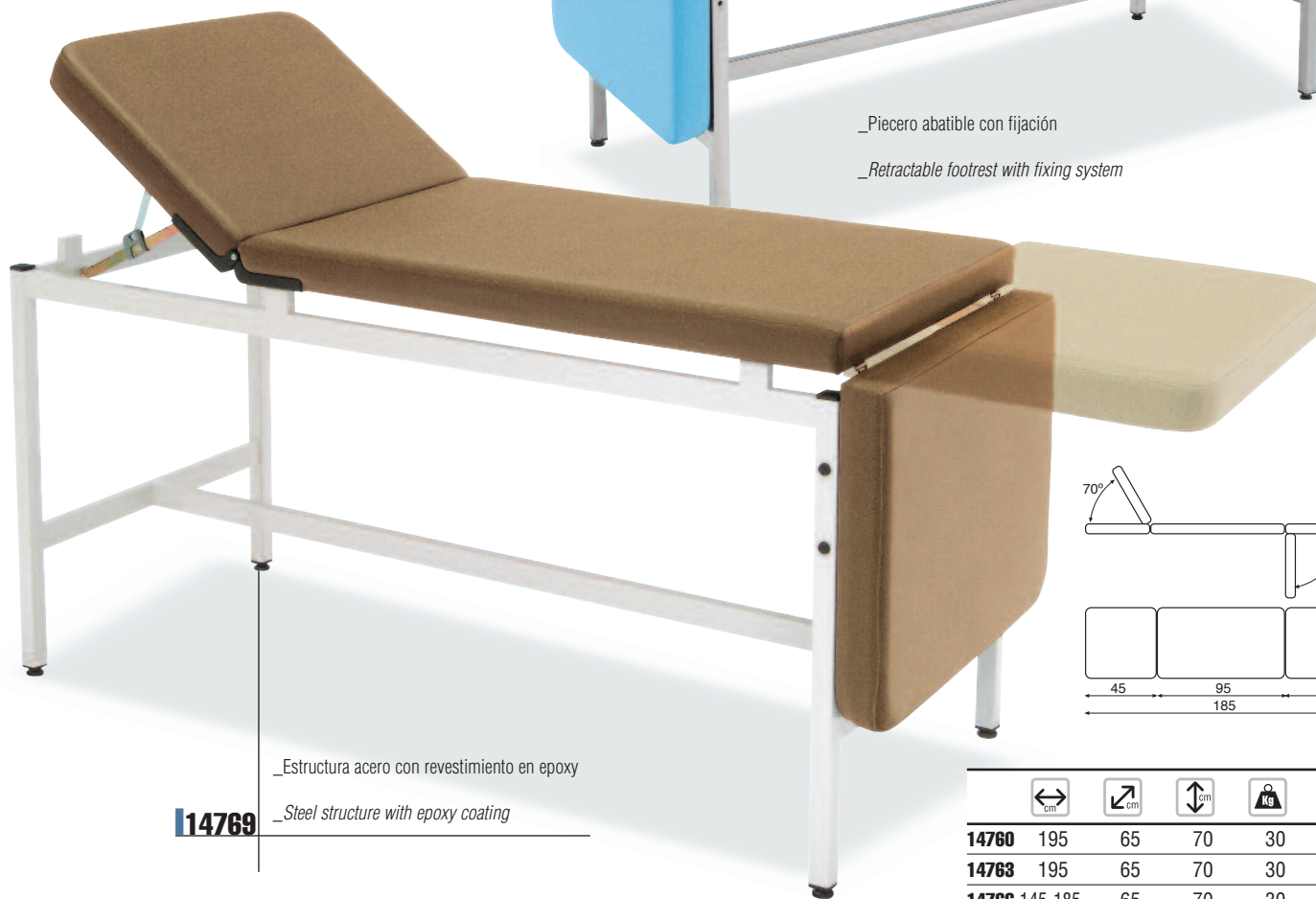

- _Estructura acero con revestimiento en epoxy
- _Steel structure with epoxy coating

14769

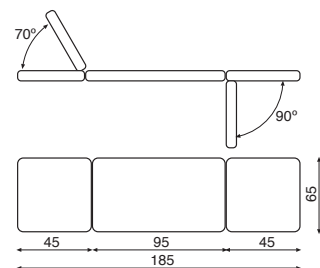

14760	195	65	70	30	0.89
14763	195	65	70	30	0.89
14766	145-185	65	70	30	0.89
14769	145-185	65	70	30	0.89

ACCESORIOS VER PÁGINA: 50 / SEE ACCESSORIES PAGE: 50



14751



14752

14757

14758



14704

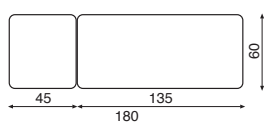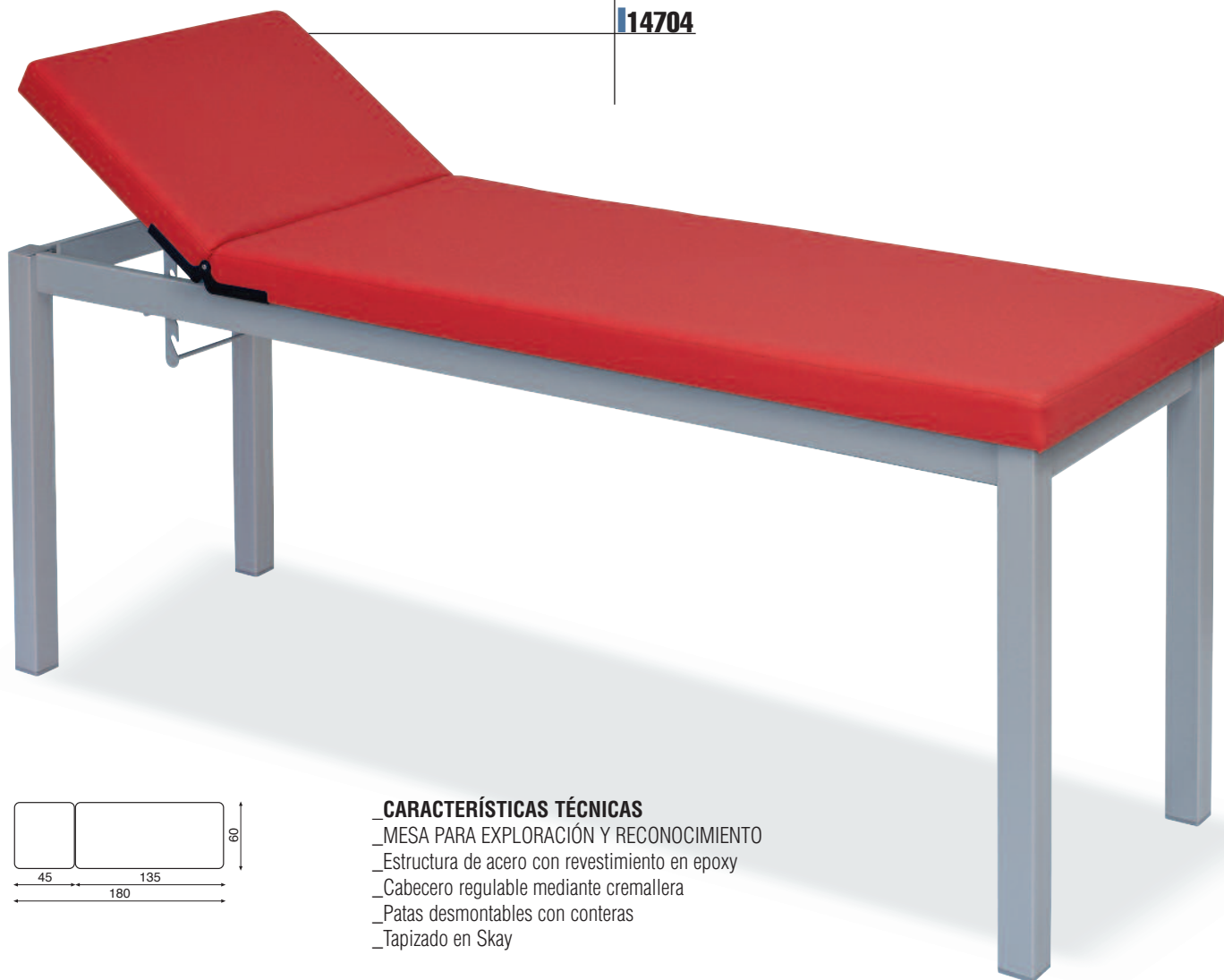

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Patas desmontables con conteras
- _ Tapizado en Skay

⚠ ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Removable legs with rubber feet
- _ Upholstered in skay


⚠ IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.






14705

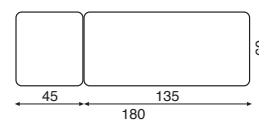


_Buck de tres cajones con cerradura y ruedas


_Buck of three drawers with key lock and wheels



	 cm	 cm	 cm	 kg	 m ³
14704	180	60	73	30	0.78
14705	180	60	73	50	0.78

Colores | Colours

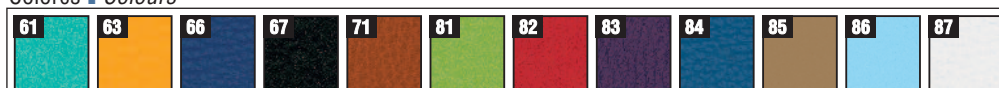

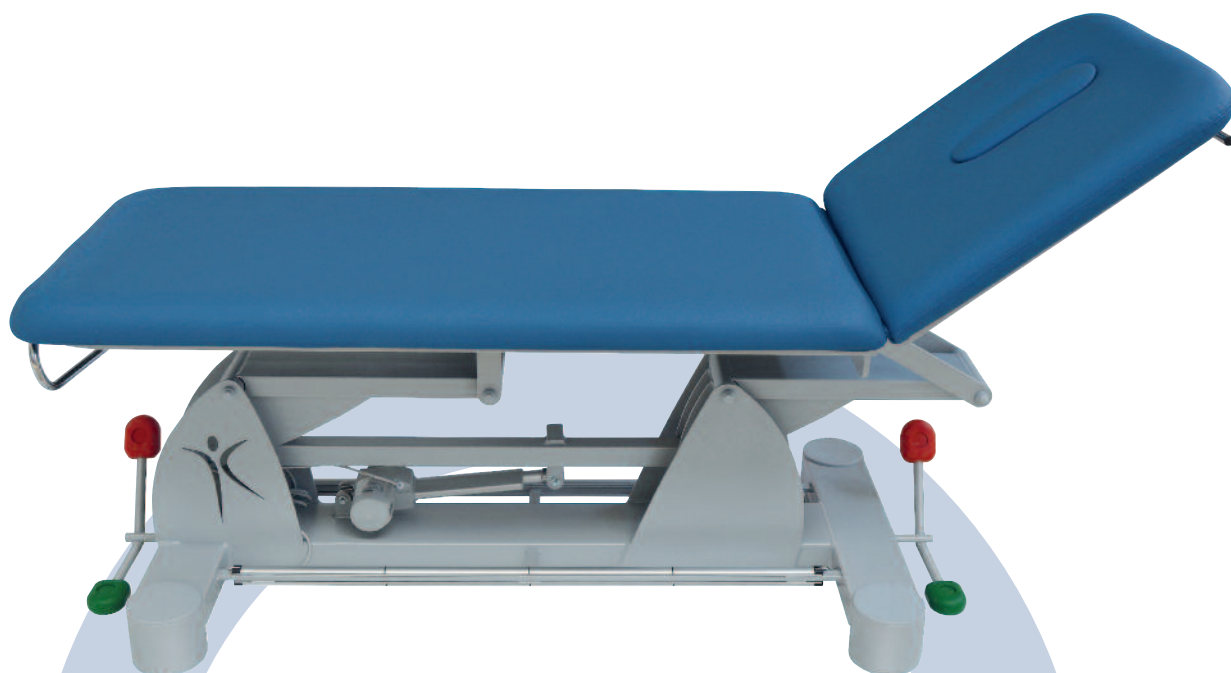

_Regulación eléctrica, con accionamiento múltiple en ambos laterales
_Electric adjustment with foot rail in both sides






14930



14930 190 65 57-93 75 0,70

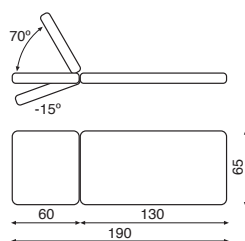**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- _ MESA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Dos secciones
- _ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Regulación eléctrica con accionamiento múltiple en ambos laterales
- _ Soporte rollo de papel cromado, incluido
- _ Tapizado en skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections
- _ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Electric adjustment with foot rail in both sides
- _ Chrome paper roll holder included as standard
- _ Upholstered in skay


! **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

! **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

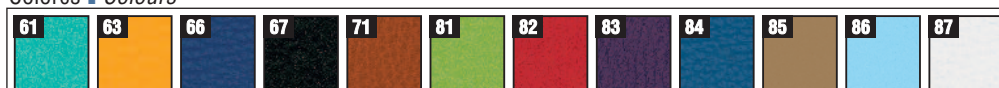Colores / Colours



14933

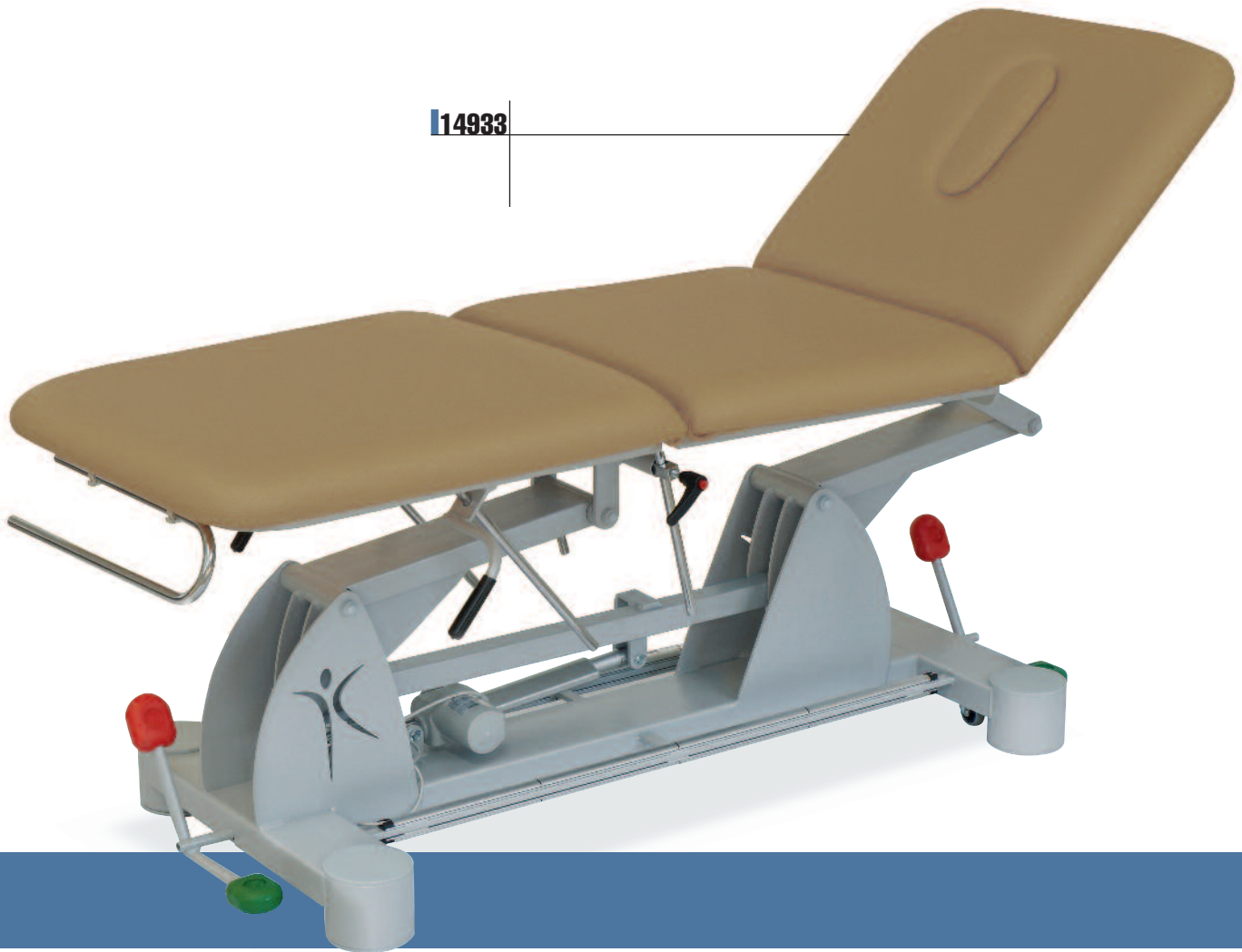

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO

- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Tres secciones
- _Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- _Orificio para rostro y tapón
- _Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _Regulación eléctrica con accionamiento múltiple en ambos laterales
- _Soporte rollo de papel cromado, incluido
- _Tapizado en skay

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**


TECHNICAL CHARACTERISTICS

EXAMINATION AND TREATMENT TABLE


- _Steel structure with epoxy coating
- _Three sections
- _Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Retractable wheels with braking system
- _Electric adjustment with foot rail in both sides
- _Chrome paper roll holder included as standard
- _Upholstered in skay

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

14933	195	65	57-93	80	0,72

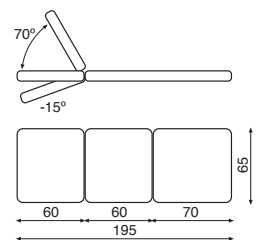

Colores / Colours

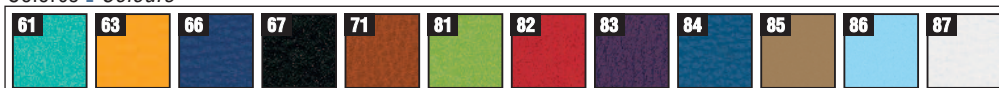

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA DE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Cinco secciones
- _ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Regulación eléctrica con accionamiento múltiple en ambos laterales
- _ Soporte rollo de papel cromado, incluido
- _ Tapizado en sky

14936


⚠ ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**



TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _ EXAMINATION AND TREATMENT TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Five sections
- _ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Electric adjustment with foot rail in both sides
- _ Chrome paper roll holder included as standard
- _ Upholstered in sky

14936	195	65	57-93	80	0,72

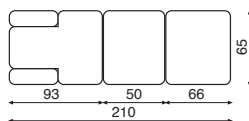

⚠ IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours

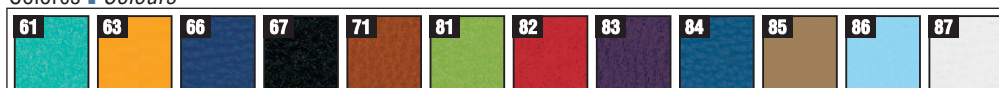



_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Regulable en altura hidráulicamente
- _Cabecero regulable mediante cremallera
- _Orificio para rostro y tapón
- _Sistema de Fijación al suelo
- _Ruedas giratorias de 60mm
- _Tapizado en Skay*
- _Soporte rollo de papel cromado incluido

⚠ ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _HYDRAULIC EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Hydraulic adjustable height
- _Adjustable headrest by rack system
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Can be rolled on retractable wheels rubber treads central lift system
- _60mm rolling wheels
- _Upholstery skay
- _Chrome paper roll holder included as standard

⚠ IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

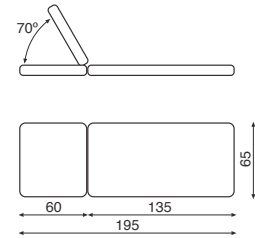

14770



14770	195	65	50-90	65	0.65
14775	195	65	50-95	65	0.65



14775

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Dos secciones
- _ Regulable en altura eléctricamente
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Sistema de Fijación al suelo
- _ Ruedas giratorias de 60mm
- _ Tapizado en Skay*
- _ Soporte rollo de papel cromado incluido

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ HYDRAULIC EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections
- _ Electric adjustable height
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Can be rolled on retractable wheels rubber treads central lift system
- _ 60mm rolling wheels
- _ Upholstery skay
- _ Chrome paper roll holder included as standard

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

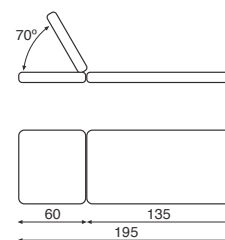

Colores | Colours


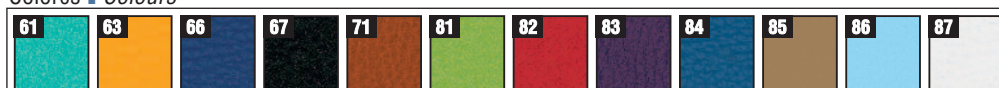









14900

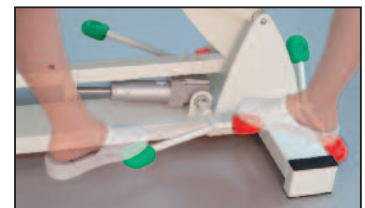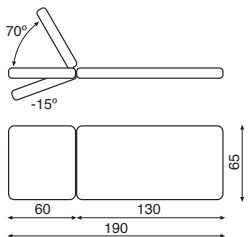_Regulable en altura hidráulicamente

_Hydraulic adjustable height





	 cm	 cm	 cm	 kg	 m ³
14900	190	65	57-93	75	0.70
14903	190	65	54-94	75	0.70

14903

_Regulable en altura eléctricamente

_Electricadjustable height

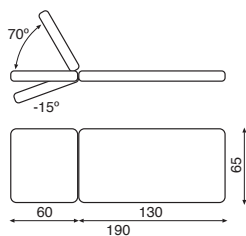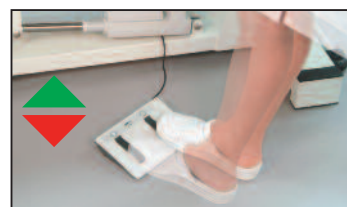**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- _MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- _Orificio para rostro y tapón
- _Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _Tapizado en Skay

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS



- _EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Hydraulic adjustable height
- _Adjustable headrest by gas-spring (70 and -15°)
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _Retractable wheels with braking system
- _Skay upholstery

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

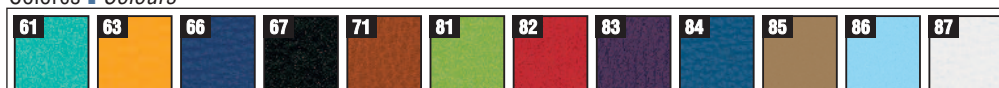Colores / Colours



14910

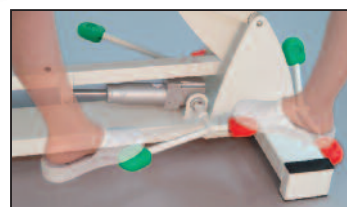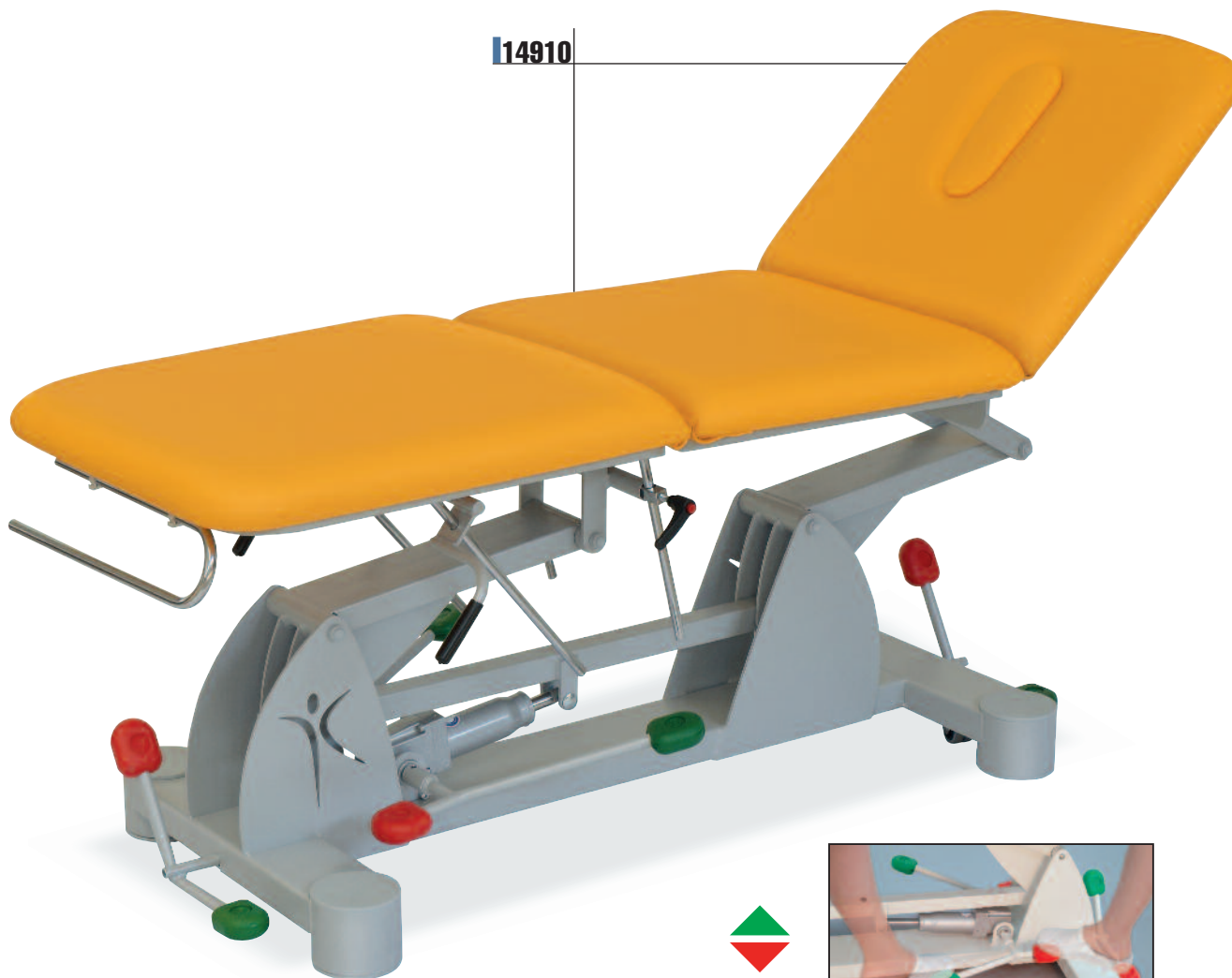

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Regulable en altura hidráulicamente
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Tres secciones
- _ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -15°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Tapizado en Skay


¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _ Hydraulic adjustable height
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Three sections
- _ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Skay upholstery

¡IMPORTANTE! Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

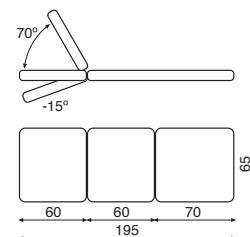

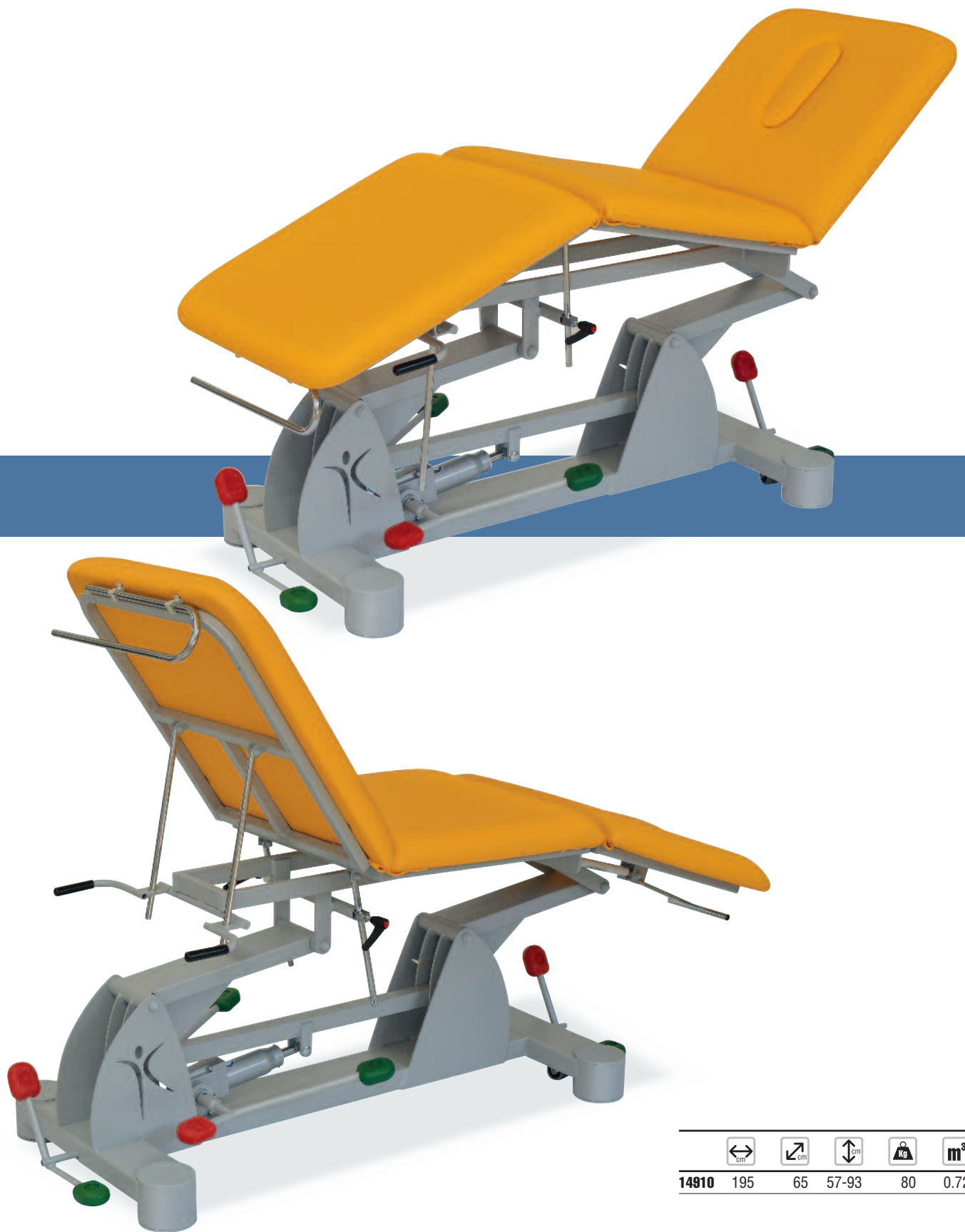

14910	195	65	57-93	80	0.72

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Regulable en altura eléctricamente
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Tres secciones
- _ Cabecero regulable mediante pistón a gas (70° y -30°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Tapizado en Skay



TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _ Electric adjustable height
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Three sections
- _ Adjustable headrest by gas-spring (70° and -15°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Skay upholstery

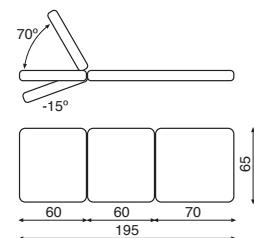

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

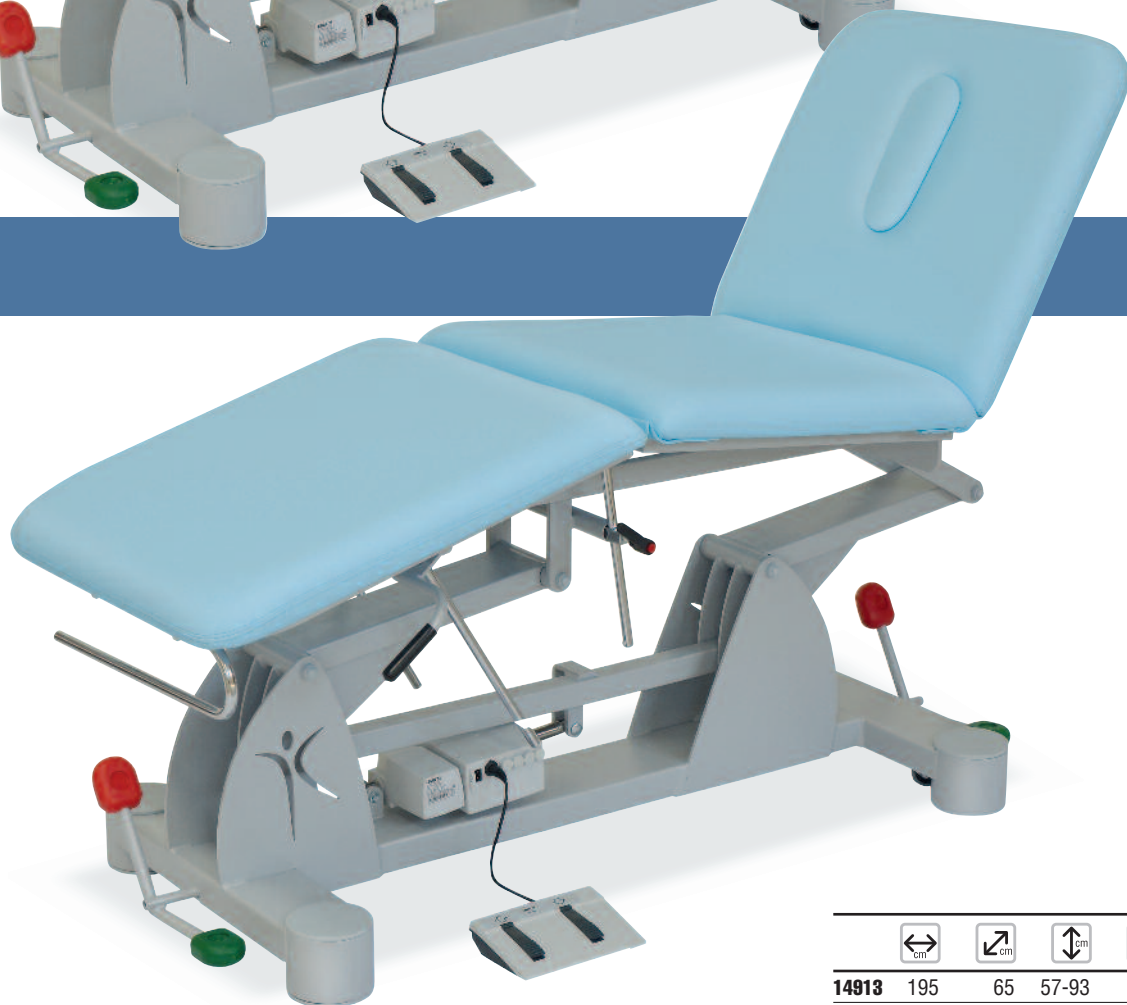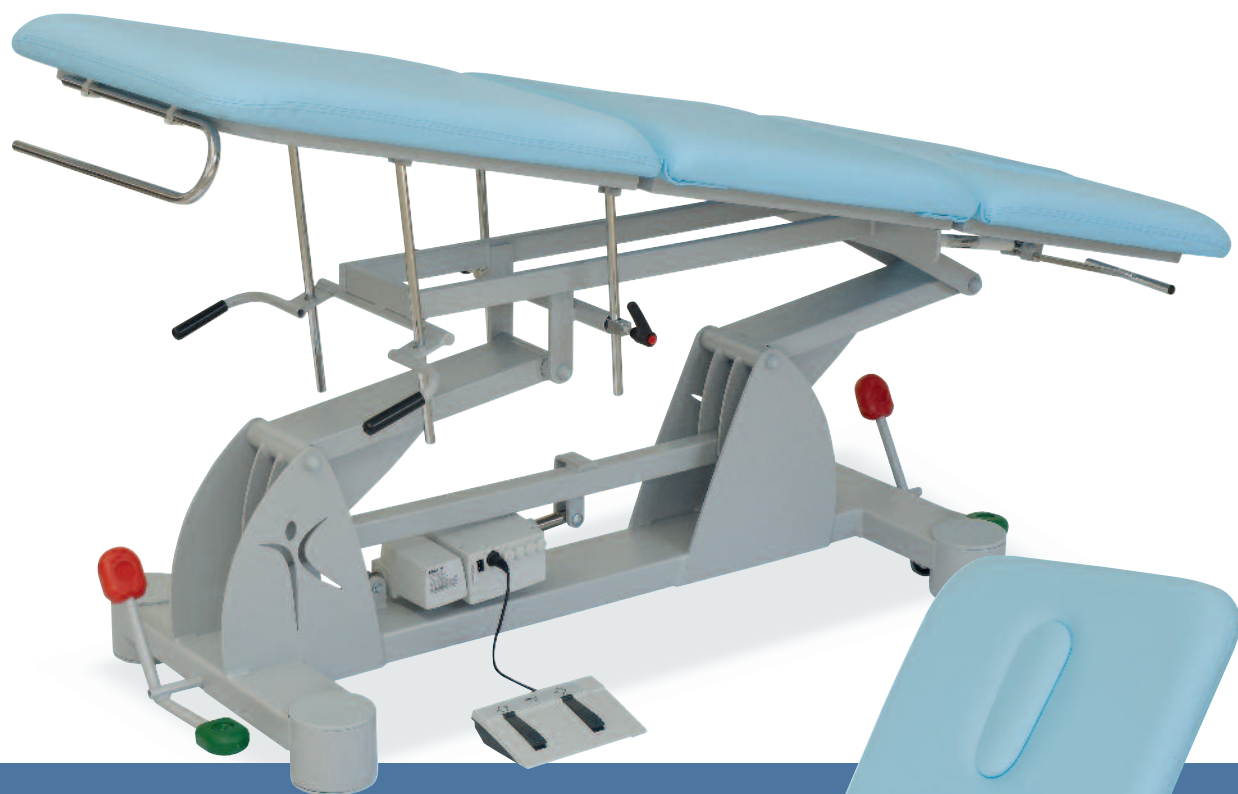



14913	195	65	57-93	80	0.72

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87



14915

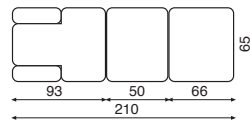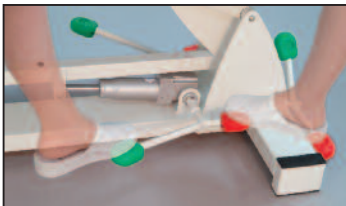



14915	210	65	57-95	80	0.78

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Regulable en altura hidráulicamente
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Tres secciones
- _ Tres cuerpos regulables mediante pistón a gas (70° y -30°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Soporte para brazos regulable en altura
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Tapizado en Skay


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _ Hydraulic adjustable height
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable three sections by gas spring (70° and -30°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Height adjustable arm rest
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Skay upholstery

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours

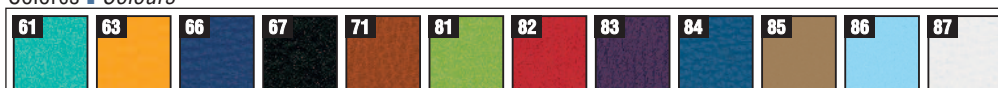




14918



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _ Regulable en altura eléctricamente
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Tres secciones
- _ Tres cuerpos regulables mediante pistón a gas (70° y -30°)
- _ Orificio para rostro y tapón
- _ Soporte para brazos regulable en altura
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Tapizado en Skay

⚠ ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

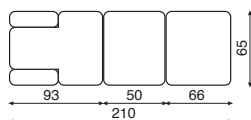

14918	210	65	57-95	80	0.78

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _ Electric adjustable height
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Adjustable three sections by gas spring (70° and -30°)
- _ Breathing hole and upholstery breathing plug
- _ Height adjustable arm rest
- _ Retractable wheels with braking system
- _ Skay upholstery

IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



14923

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- _MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Dos secciones
- _Regulable en altura eléctricamente
- _Cabecero regulable mediante pistón a gas (70°)
- _Orificio para rostro y tapón
- _Una pata con nivelador
- _Tapizado en Skay

! **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.

_TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _Two sections
- _Electric adjustable height
- _Adjustable head rest by gas spring (70°)
- _Breathing hole and upholstery breathing plug
- _One leveling ending leg
- _Skay upholstery

! **IMPORTANT:** Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

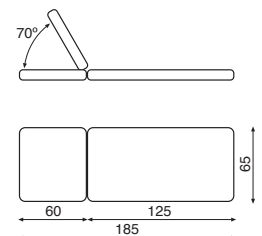

14920	200	100	55-95	95	1.10
14923	185	65	52-90	65	0.63

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ELECTRIC EXAMINATION, TREATMENT AND MASSAGE TABLE

- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections
- _ Electric adjustable height
- _ Adjustable headrest by rack
- _ Can be rolled on retractable wheels rubber treads central lift system
- _ Skay upholstery



! IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.

14920




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MESA DE MASAJE EXPLORACIÓN Y TRATAMIENTO


- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Dos secciones
- _ Regulable en altura eléctricamente
- _ Cabecero regulable mediante cremallera (60°)
- _ Ruedas retráctiles con sistema de frenado
- _ Tapizado en Skay

! IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**

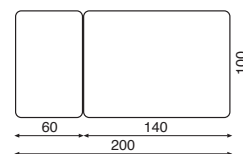


Colores / Colours

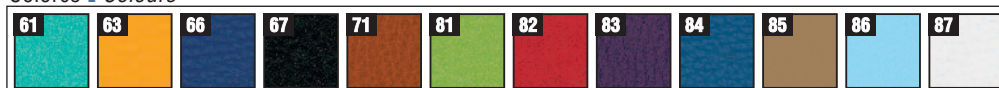

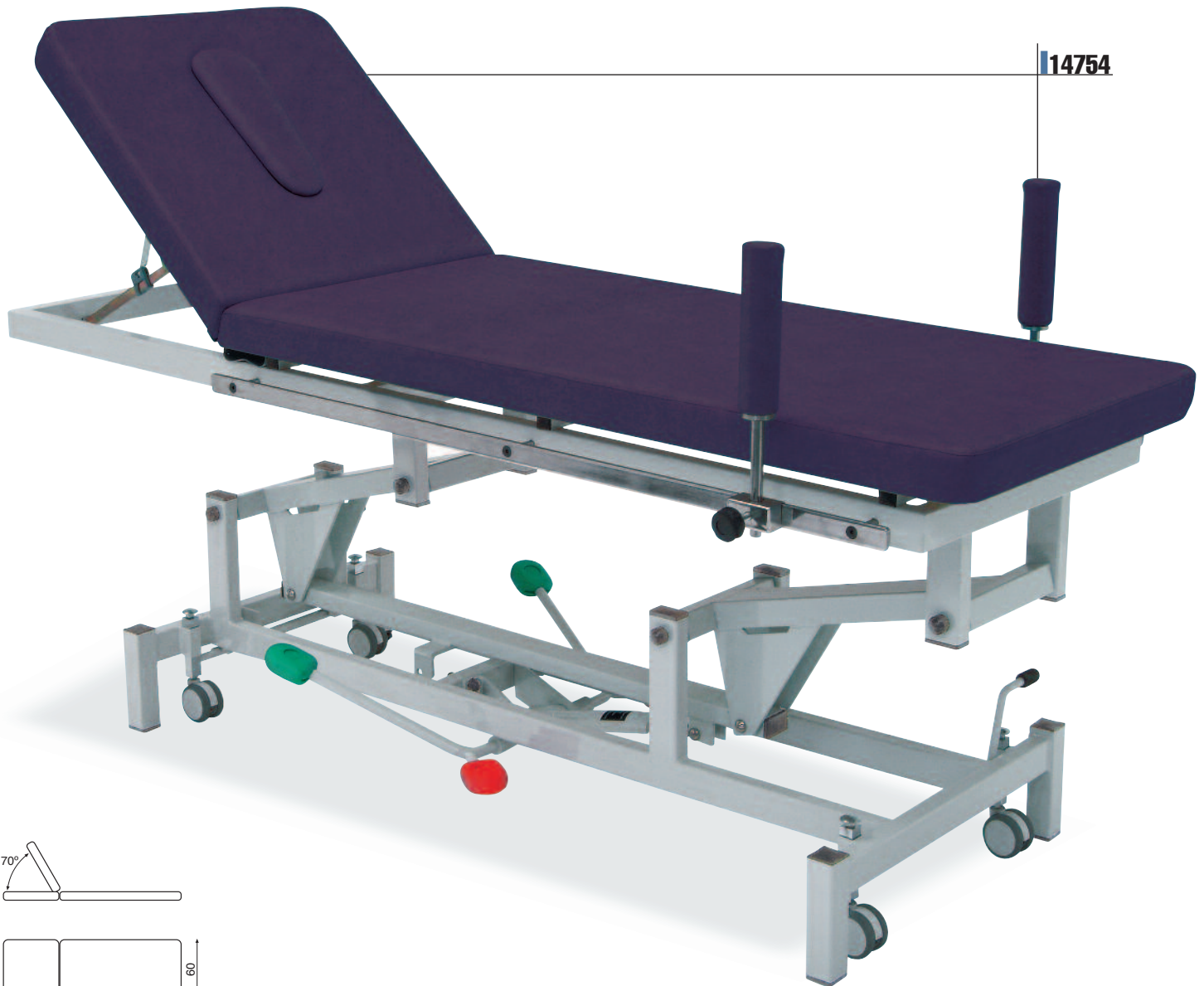

14754

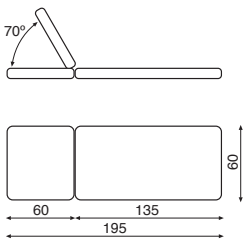

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA EXPLORACIÓN Y ENYESADOS
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Dos secciones
- _ Juego de rulos con soporte de sujeción en ambos lados
- _ Regulable en altura hidráulicamente
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Sistema de fijación al suelo
- _ Ruedas giratorias de 60mm
- _ Tapizado en Skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _ EXAMINATION AND PLASTERING TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections
- _ Rollers set with fixing support on both sides
- _ Hydraulic adjustable height
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Fixe table to the floor
- _ 60mm Rolling wheels
- _ Skay upholstery

14754	195	60	50-90	65	0.60
14756	195	60	50-90	65	0.60

! ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

! **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours

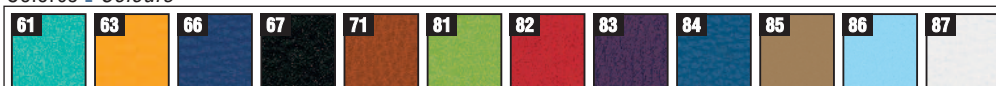

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA EXPLORACIÓN Y PEQUEÑAS CIRUGÍAS
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Dos secciones
- _ Mesa acero inoxidable para cirugía de extremidades, regulable en altura horizontal con sujeción a ambos lados
- _ Arco de narcosis
- _ Regulable en altura hidráulicamente
- _ Cabecero regulable mediante cremallera
- _ Sistema de fijación al suelo
- _ Ruedas giratorias de 60mm
- _ Tapizado en Skay

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ EXAMINATION AND SMALL SURGERIES TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Two sections
- _ Stainless steel table for extremities surgery, horizontal height adjustable and support on both sides
- _ Hydraulic adjustable height
- _ Adjustable headrest by rack system
- _ Fixe table to the floor
- _ 60mm Rolling wheels
- _ Skay upholstery


 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



_ Mesa para cirugía de extremidades superiores

_ Upper extremities surgery table

14756

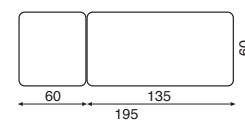




14650




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- _ MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA MOD. GANDÍA
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Altura regulable eléctricamente
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- _ Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico
- _ Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- _ Cajón recolector acero inoxidable
- _ Juego de perneras apoya piernas regulables en altura
- _ Ruedas ocultas para su desplazamiento con sistema de fijación al suelo
- _ Tapizado en Skay

 **¡IMPORTANTE!** En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ GYNAECOLOGY TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Electric adjustable height
- _ Backrest operated by gas system from horizontal to seated horizontal
- _ Trendelemburg position operated electrically
- _ Footrest operated by gas system
- _ Stainless steel waste bin
- _ Set of legs rests
- _ Can be rolled on retractable wheels rubber treads central lift system
- _ Skay upholstery

 **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

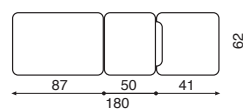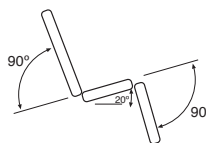



_20° respecto a la horizontal

_20° reclining from the horizontal



14750

_Soporte rollo de papel cromado

_Chrome paper roll holder



_Trendelenburg

14650	180	75	65-100	82	0.88

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------




14655



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA MOD. QUITERIA
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Altura regulable electricamente
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- _ Piecero abatible hasta posición horizontal mediante resorte a gas
- _ Trendelemburg simultáneo en posición elevada
- _ Cajón recolector en acero inox
- _ Juego de perneras apoya piernas regulables en altura
- _ Apoyacabezas regulable en altura
- _ Cuatro patas una de ellas con nivelador
- _ Tapizado en Skay


¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

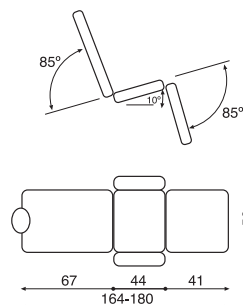

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ GYNAECOLOGY TABLE MOD. QUITERIA
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Electric adjustable height
- _ Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- _ Folding footrest by gas system to horizontal position
- _ Simultaneous trendelemburg in high position
- _ Stainless steel waste bin
- _ Sets of leg rest
- _ Height adjustable headrest
- _ Four legs, one with level
- _ Upholstered in Skay

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

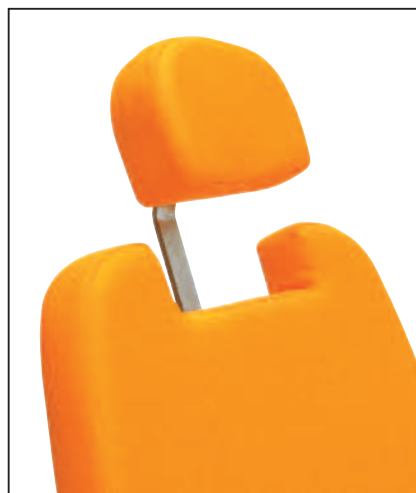

_Apoyacabezas regulable en altura

_Height adjustable headrest



14655	180	80	52-92	62	0,87

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



14675



_Soporte rollo papel

_Paper roll support

14678



_Juego de brazos regulables en altura y horizontal

_Height adjustable and horizontal armrest

14681



_Juego de perneras de poliuretano con funda, regulables en altura

_Height adjustable polyurethane leg rest with coverture

14684



_Juego de reposapiés de poliuretano, regulables

_Regulable polyurethane footrest





14660

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA UNIVERSAL
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Base y columna central cubiertas en ABS
- _ Altura regulable eléctricamente
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- _ Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico
- _ Piecero abatible y extraíble manualmente
- _ Cajón recolector acero inoxidable
- _ Trendelemburg eléctrico hasta 21°
- _ Tapizado en Skay

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

14660	130	65	60-90	95	0.55

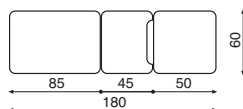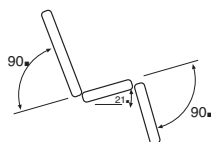


TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ UNIVERSAL TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ ABS base and central column
- _ Electric adjustable height
- _ Backrest operated electrically from horizontal to seated position 90°
- _ Trendelemburg seat position operated electrically
- _ Manually removable and folding footrest
- _ Stainless steel waste bin
- _ Electric trendelemburg to 21°
- _ Skay upholstery

IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours

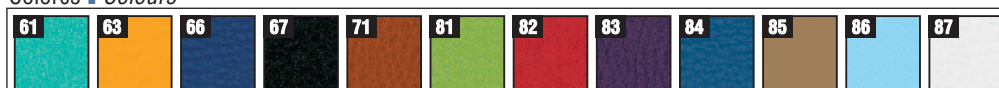



14663



**ACCESORIOS OPCIONALES
VER PÁGINA: 40**

- _ Soporte rollo papel. **Ref: 14675**
- _ Juego de brazos. **Ref: 14678**

**SEE OPTIONAL ACCESORIES
PAGE: 40**

- _ Paper roll support. **Ref: 14675**
- _ Armrest. **Ref: 14678**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA Y UROLÓGICA
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Base y columna central cubiertas en ABS
- _ Altura regulable eléctricamente
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- _ Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico
- _ Piecero abatible y extraíble manualmente
- _ Cajón recolector acero inoxidable
- _ Trendelemburg eléctrico hasta 21°
- _ Tapizado en Skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ GYNECOLOGY AND UROLOGY EXAMINATION TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ ABS base and central column
- _ Electric adjustable height
- _ Backrest operated electrically from horizontal to seated position 90°
- _ Trendelemburg seat position operated electrically
- _ Manually removable and folding footrest
- _ Stainless steel waste bin
- _ Electric trendelemburg to 21°
- _ Skay upholstery

! ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

! **IMPORTANT:** Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.



_Juego de reposapiés de poliuretano, regulables

_Regulable polyurethane footrest



_Piecero abatible y extraíble manualmente

_Manually removable and folding footrest

14663	130	65	60-90	95	0.55

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87





14666

**_ACCESORIOS OPCIONALES
VER PÁGINA: 40**

- _Soporte rollo papel. Ref: 14675
- _Juego de brazos. Ref: 14678

**_SEE OPTIONAL ACCESORIES
PAGE: 40**

- _Paper roll support. Ref: 14675
- _Armrest. Ref: 14678

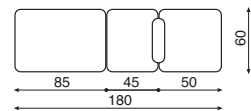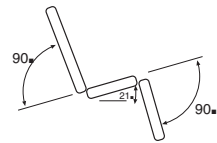

_Trendelemburg eléctrico hasta 21°

_Electric trendelemburg to 21°

_Juego de perneras de poliuretano, regulables en altura

_Height adjustable polyurethane leg rest



14666	130	65	60-90	95	0.55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA Y UROLÓGICA
- _Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _Base y columna central cubiertas en ABS
- _Altura regulable eléctricamente
- _Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- _Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico
- _Piecero abatible y extraíble manualmente
- _Cajón recolector acero inoxidable
- _Trendelemburg eléctrico hasta 21°
- _Tapizado en Skay

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _GYNECOLOGY AND UROLOGY EXAMINATION TABLE
- _Steel structure with epoxy coating
- _ABS base and central column
- _Electric adjustable height
- _Backrest operated electrically from horizontal to seated position 90°
- _Trendelemburg seat position operated electrically
- _Manually removable and folding footrest
- _Stainless steel waste bin
- _Electric trendelemburg to 21°
- _Skay upholstery


IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.

Colores | Colours

61	63	66	67	71	81	82	83	84	85	86	87
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



14669

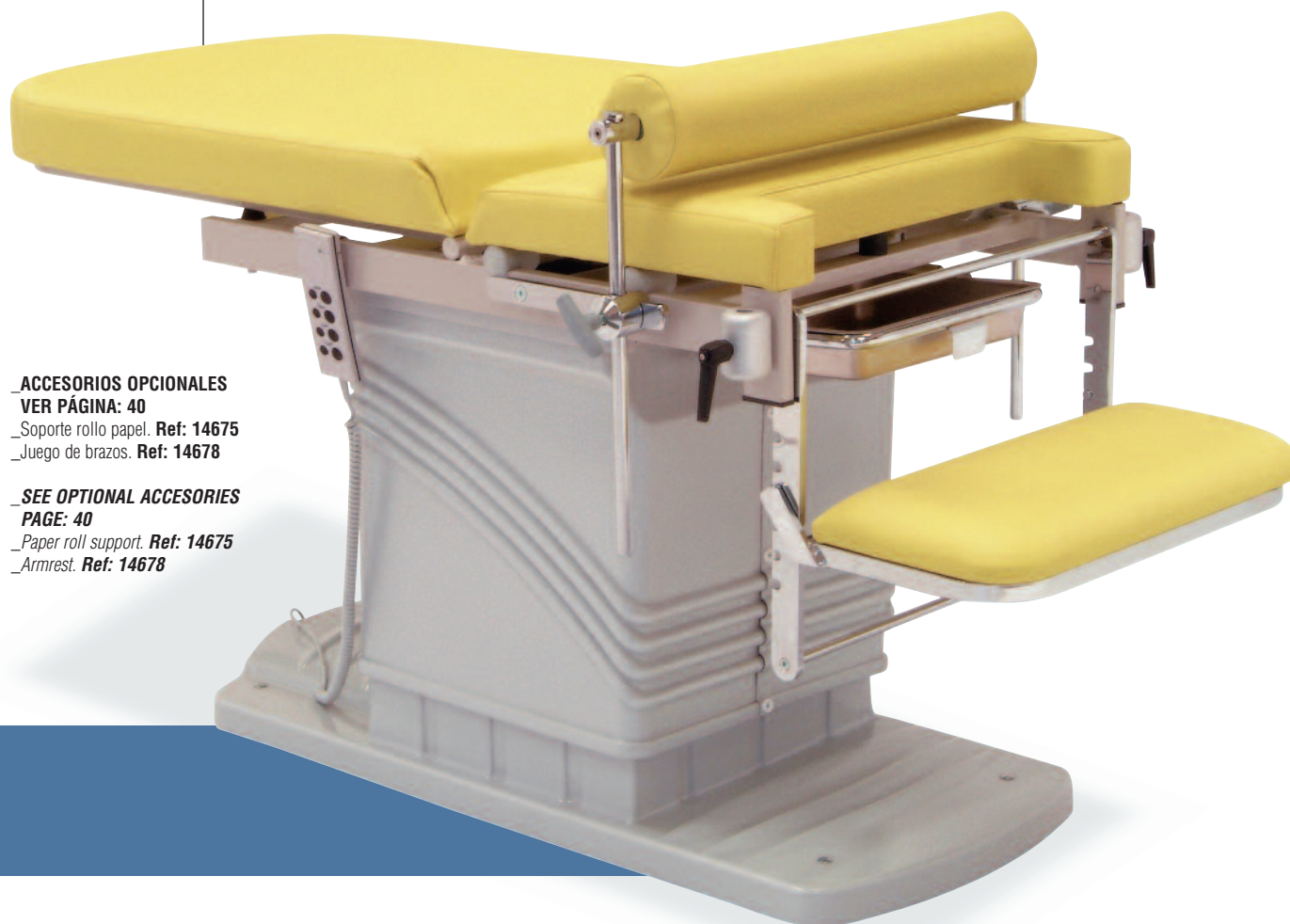

**ACCESORIOS OPCIONALES
VER PÁGINA: 40**

- _ Soporte rollo papel. **Ref: 14675**
- _ Juego de brazos. **Ref: 14678**

**SEE OPTIONAL ACCESORIES
PAGE: 40**

- _ Paper roll support. **Ref: 14675**
- _ Armrest. **Ref: 14678**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA ENDOSCOPIA Y RECTOSCOPIA
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Base y columna central cubiertas en ABS
- _ Altura regulable eléctricamente
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado regulable eléctricamente 90°
- _ Asiento (soporte de pelvis) con trendelemburg eléctrico
- _ Piecero abatible y extraíble manualmente
- _ Cajón recolector acero inoxidable
- _ Trendelemburg eléctrico hasta 21°
- _ Tapizado en Skay

⚠ ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color, por defecto se entenderá **NEGRO**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ ENDOSCOPY AND PROCTOSCOPY EXAMINATION TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ ABS base and central column
- _ Electric adjustable height
- _ Backrest operated electrically from horizontal to seated position 90°
- _ Trendelemburg seat position operated electrically
- _ Manually removable and folding footrest
- _ Stainless steel waste bin
- _ Electric trendelemburg to 21°
- _ Skay upholstery

⚠ IMPORTANT: Finishing **BLACK** colour will be applied if not specified otherwise.




_Trendelemburg eléctrico hasta 21°

_Electric trendelemburg to 21°


_Soporte rodillas regulable manualmente y extraíble

_Manually removable and folding knees support

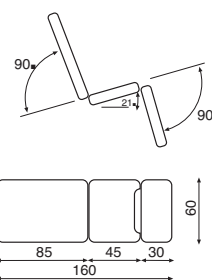

14869	130	65	60-90	95	0.55

Colores | Colours

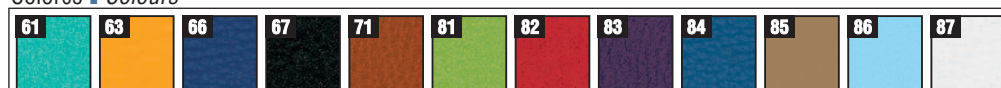



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ MESA PARA EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA MOD. YAIZA
- _ Estructura de acero con revestimiento en epoxy
- _ Base de columna que soporta el tablero de la mesa
- _ Trendelemburg accionado por resorte a gas
- _ Cajón para restos en acero inoxidable
- _ Respaldo posicionable desde la horizontal a sentado mediante resorte a gas
- _ 15° de trendelemburg
- _ Dos pneras apoya piernas regulables en altura
- _ Patas con niveladores
- _ Tapizado en Skay



! ¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **GRIS**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- _ GYNAECOLOGY TABLE
- _ Steel structure with epoxy coating
- _ Table's board fixed onto a column base
- _ Trendelemburg position operated by gas system
- _ Stainless steel waste bin
- _ Backrest operated by gas system from horizontal to seated position
- _ 15° trendelemburg
- _ Height adjustable legrests
- _ Levelling feet
- _ Skay upholstery

! **IMPORTANT:** Finishing in **GRAY** colour will be applied if not specify otherwise.

14613

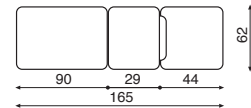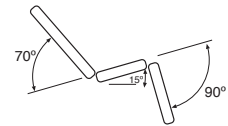

14613	165	75	80	70	0.99

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- _ Estructura en acero cromado
- _ Juego de perneras apoya piernas regulables en altura
- _ Respaldo y pieceros regulable mediante cremallera
- _ Cajón para restos en acero inoxidable
- _ Banquillo de acceso
- _ Posición de trendelemburg
- _ Patas con conteras
- _ Tapizado en Skay

TECHNICAL CHARACTERISTICS


- _ Chromed steel structure
- _ Set of legs rests
- _ Backrest and footrest operated by rack system
- _ Stainless steel waste bin
- _ Access step
- _ Trendelemburg position system
- _ Floor protection by rubbers studs
- _ Skay upholstery

¡IMPORTANTE! En caso de no especificarse color del tapizado, por defecto se entenderá **NEGRO**.


IMPORTANT: Finishing in **BLACK** colour will be applied if not specify otherwise.




14603

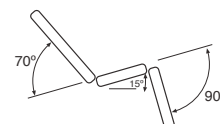

14603	145	72	87	31	0.91

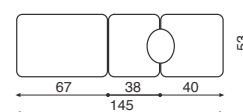

Colores | Colours

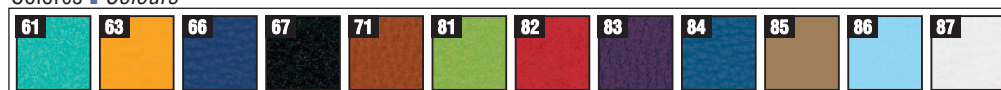




14751



_Soporte rollo

_Paper roll support

14752

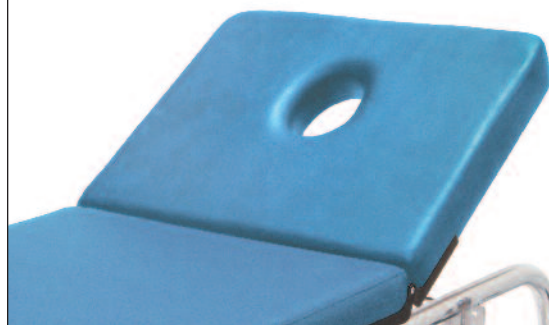

_Cabecero con orificio

_Breathing hole

14757



_Ruedas de 100mm, dos con freno

_100mm wheels, two with brakes

14758



_Juego de perneras

_Set of legrests, göpel type

Características Técnicas SKAY | SKAY Technical characteristics

TAPIZADO

- _Protección antimicrobiana
- _Protección antibacteriana
- _Protección antimicótica
- _Alta resistencia a la abrasión
 - Test Martindale en seco >51.200 revoluciones
 - Test Martindale en húmedo >12.800 revoluciones
 - Test Wyzenbeek > 70.000 revoluciones
- _Resistencia a la transpiración y saliva humana
- _Resistencia a la orina
- _Resistencia a la sangre
- _Superficie resistente a las manchas

FACILIDAD DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- _Lavar con agua y jabón suave
- _Enjuagar con agua limpia
- _Secar con un trapo suave

IMPORTANTE: No emplear sustancias abrasivas, disolventes ni compuestos de silicón. Evite también limpiar con cepillos de cerda dura o esponjitas metálicas ya que pueden afectar a las propiedades del material.

MATERIAL IGNÍFUGO _M-2

UPHOLSTERY

- _Antimicrobial protection
- _Antibacterial protection
- _Antimitotic protection
- _Super abrasion resistance
 - Martindale test (dry) >51.200 rubs
 - Martindale test (wet) >12.800 rubs
 - Wyzenbeek test > 70.000 rubs
- _Resistance to spitting and perspiration
- _Urine resistance
- _Blood resistance
- _Stain resistance surface













EASY TO CLEAN AND MAINTAIN

- _Wash with neutral soap and water
- _Rinse with clear water
- _Pat dry with a soft cotton cloth

IMPORTANT: Do not use abrasives, solvents or silicone compounds. Also avoid cleaning with stiff bristled brushes or metal sponges, as they can affect the material properties.

FLAME RETARDANT _M-2

Colores | Colours

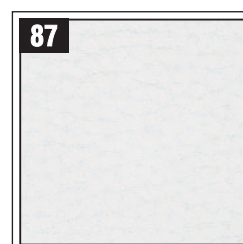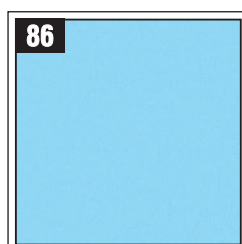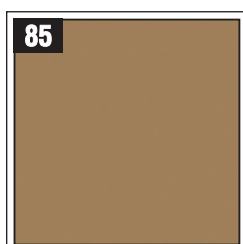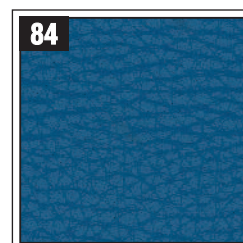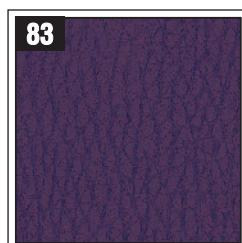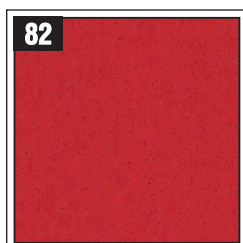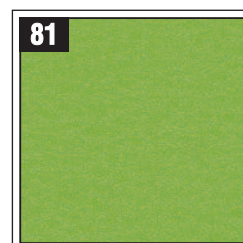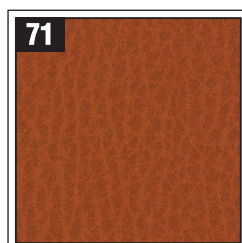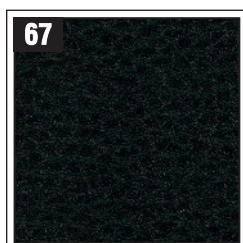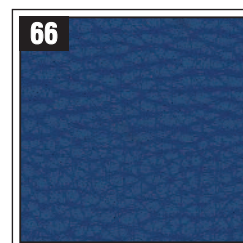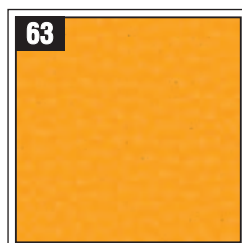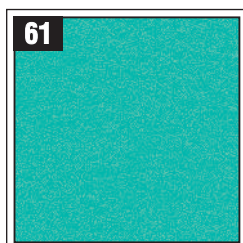

_Debido a las variables en impresión, los colores son lo más aproximado posible a la realidad.

_Due to the printing variable, the colours are the most approximately close to reality.

MESAS DE
RECONOCIMIENTO

*EXAMINATION AND
TREATMENT TABLES*

7

C/ Serranía de Cuenca, 10
Pol. Ind. El Olivar
28500 Arganda del Rey (Madrid) Spain
Telf.: 91 872 96 16
91 872 96 17
91 872 96 18
Fax: 91 872 00 40
info@inmoclinc.com
www.inmoclinc.com