

**nuova** **Bn**  
INNOVATION AND TECHNOLOGY  
FOR SURGICAL ACTIVITY



TAVOLO ENDOSCOPICO MULTISPECIALISTICO  
MULTISPECIALISTIC STRETCHER

Serie **Bn ETP**

# Serie BN ETP

La versatilità è la sua forza / The versatility is its strength

La barella multifunzionale e specialistica abbina versatilità ad alti standard qualitativi per adattarsi facilmente a tutte le esigenze ospedaliere, dal trasporto del paziente, in modo confortevole, fino ad attività più specialistiche. La particolare configurazione a "C" della base garantisce stabilità e facilita l'accessibilità degli operatori sanitari nello svolgimento delle proprie attività. La colonna decentrata di minimo ingombro (modello BN ETP EL), permette l'utilizzo di amplificatori di brillanza evitando così lo spostamento del paziente durante le analisi radiologiche, endoscopiche, urologiche e in altre attività diagnostiche e terapeutiche. I modelli sono personalizzabili con diversi accessori per configurarsi alle diverse attività cliniche.

The multifunctional specialistic stretcher combines versatility with high quality standards in order to be easily adaptable to satisfy all hospital needs, from comfortable transport of patient to more specialistic activities. The particular "C" shape of the base warrants stability and easily access for the health care professionals during their activities. The decentralized column of minimum encumbrance (BN ETP EL model), allows the use of X-rays intensifiers avoiding to move the patient during the radiological, endoscopic, urological radiological analysis and in others diagnostic and therapeutic activities. Models are customizable with different kind of accessories in order to be configured for the different clinical activities.



Il tavolo è completamente in acciaio Inox con trattamento antiriflesso, per la massima robustezza. Il piano suddiviso in 2 sezioni è radiotrasparente per 1850mm in lunghezza e per l'intera larghezza.

The operating table is completely made of stainless steel with reflection proof treatment for maximum strength. The table top splits into 2 sections and it is X-Ray translucent for 1850mm in length and for the whole width.

Carica batterie elettronico con arresto automatico a fine carica, con doppia funzione: ricarica degli accumulatori e alimenta il letto a batterie scaricate.

Electronic batteries charger with automatic stop at the end of charge, with double function: it recharge the batteries and feeds the stretcher when batteries are discharged.



Telecomando a cavo/Remote wired control.

Maniglioni alle estremità del piano per facilitare la movimentazione / Big handles at the ends of table top to facilitate movement.

Il piano del tavolo è in laminato e ricoperto con materassini OPC antidecubito (h 80 mm). I materassini sono asportabili e sterilizzabili.

Latex free.  
The table top is made of high pressure laminates and covered with OPC pads (h 80mm) which ensure the bedsores reduction. Pads are removable for sterilization. Latex free.

Alcuni accessori a richiesta  
Some accessories on demand

Spondina laterale ribaltabile a 3 posizioni (0°/90°/180°).  
Lateral barrier overturning, 3 positions (0°/90°/180°).

**BN ETP-A69/A**

(lunghezza/Length 600mm)

**BN ETP-A69/B**

(lunghezza/Length 1200mm)



**BN ETP-L**  
Cassetta porta lastre  
X-Ray film holder




**BN ETP-M**  
Porta monitor/monitor support.



**BN ETP-R**  
Porta rotolo a "L" da innestare alla guida laterale del tavolo, completo di morsetto.  
Roll holder "L" shaped for the insertion on the lateral rail of the operating table, clamp included.



**BN ETP-RX**  
Telo di protezione RX.  
RX saving cloth.

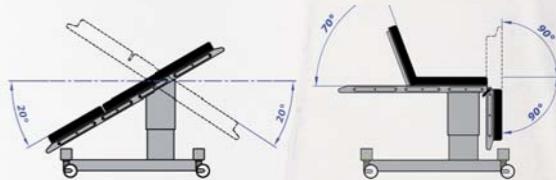

Caratteristiche generali / General features	BN ETP Meccanica / Mechanical	BN ETP EL Elettromeccanica / Electromechanical
Colonna / Column	Centrale / Centralized column	Decentratata / Decentralized column
Dimensioni del piano / Table Top dimensions	1970-570 (650) mm	
Peso / Weight	~ 160 kg	
Blocco-sblocco ruote / Castors lock-unlock	Mediane pedali / Foot control	
Spessore materassini / Mattress thickness	<b>30mm</b> <b>Per piano da 570mm</b> (materassini schiumati) / For table top of 570mm (foam mattresses) <b>80mm</b> <b>Per piano da 570 e 650mm</b> (materassini OPC) / For table top of 570 and 650mm (OPC mattresses)	
Capacità di carico dinamico / Load capacity	~ 160 kg, per capacità superiore solo con asta di sicurezza inserita / Security rod increase the support capacity	

Movimenti / Positions	BN ETP	BN ETP EL
Alzata / Discesa - Up/Down	<b>630-930 mm</b> Idraulico / Hydraulic	<b>630-930 mm</b> Elettromeccanico / Electromechanical
Trendelenburg / Contro Trendelenburg	<b>20°/20°</b> Molla a gas / Gas spring	<b>20°/20°</b> Elettromeccanico / Electromechanical
Trendelenburg / Reverse Trendelenburg		
Inclinazione schienale - Back section adjustment	<b>0°+70°</b> Molla a gas / Gas spring	
Sezione gambe (opzionale) - Leg section (Optional)		<b>+90°-90°</b> Meccanico / Mechanical



## Serie BN ETP



NUOVA BN S.r.l.

Via Nessa 19/21 - 10048 Vinovo (TO) Italy  
Ph. +39 011 965 44 46 - Fax +39 011 965 42 89  
info@nuovabn.it - [www.nuovabn.it](http://www.nuovabn.it)

